

Thermo

ELECTRON CORPORATION

BRUGERVEJLEDNING

SHANDON CYTOCLIP™ OBJEKTGLASHOLDERTPX PRØVEKAMREFILTERKORT

Til brug med Shandon Cytospin® cytocentrifuge

A78310253

3. udgave

Anatomical Pathology

93 - 96 Chadwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PR, UK

Tel: +44 (0) 1928 566611;

Fax: +44 (0) 1928 565845;

www.thermo.com/shandon

171 Industry Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, PA 15275, U.S.A.

Tel: +1 412 788 1133;


Fax: +1 412 788 1138;

www.thermo.com/shandon

SHANDON CYTOSPIN® BRUGERVEJLEDNING FOR TILBEHØR

Shandon Cytoclip, TPX kamre, filterkort

Til brug med Shandon Cytospin® cytocentrifuge

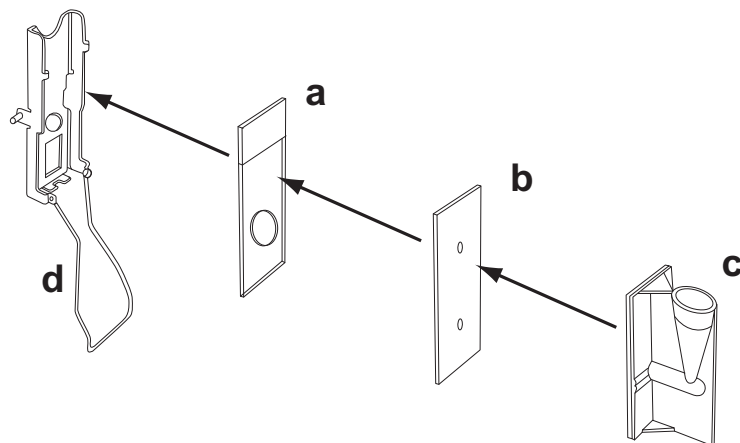

Sæt Shandon Cytoclip objektglasholder sammen med det genbrugelige prøvekammer og filterkortet:

- 1 Sæt objektglasset i (a).
- 2 Sæt filterkortet i (b).
- 3 Sæt det genbrugelige prøvekammer i (c).
- 4 Træk fjederen op (d), og tryk den ind i de to kroge for at holde kammeret på plads.
- 5 Sørg for at prøvekammeret og filterkortet er rettet ind efter hinanden.

Bemærk: For at sikre at vævsprøven ikke rører objektglasset før centrifugeringen, skal prøven altid sættes i, efter at prøvekammeret er sat i det forseglede hoved

Der henvises til brugermanualen for Shandon Cytospin for alle oplysninger om brug af Shandon Cytospin, hvorledes det forseglede hoved sættes i og afbalanceres, og hvorledes vævsprøven sættes i.

Objektglasset tages ud af Cytoclip således: Hold godt fast på objektglasset, og skub fjederen mod glasset for at gøre den fri af krogene. Tag fjederen af krogene, og løs prøvekammeret fra holderen. Tag objektglasset ud.

Opbevar Shandon Cytoclips, TPX kamrene og filterkortene i rene, tørre omgivelser, når de ikke er i brug.



SØRG FOR AT ANVENDE GOD LABORATORIEPRAKSIS, NÅR DER HÅNDTERES MATERIALER, DER KAN VÆRE FARLIGE



FILTERKORT ER KUN TIL ENGANGSBRUG - De må ikke anvendes mere end én gang.

Thermo Electron Corporation makes every endeavour to ensure that the information contained in its support documentation is correct and clearly stated but does not accept responsibility for any errors or omissions. The development of Thermo products and services is continuous. Make sure that any published information that you use for reference is up to date and relates to the status of the product. If necessary, check with Thermo or your local Thermo representative.

All information contained in this manual is proprietary and confidential, and the exclusive property of Thermo Electron Corporation. This manual is protected by copyright and any reproduction is prohibited. This manual is for use only by the individuals to which it has been made available by Thermo Electron Corporation.

© 2002-2004 Thermo Electron Corporation. All rights reserved.

This manual may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machine readable form without prior written consent of Thermo

Anvisningerne for rengøring og dekontaminering er angivet i nedenstående tabel.

Tabel 1. Rengøring og dekontaminering

Del	Hyppighed	Anvisninger
Cytoclip objektglasholder	Dagligt	Kontroller, at holderen ikke er beskadiget
		Autoklaver ved 121°C (250°F) i 15 minutter
		Alternativt kan den desinficeres ved nedsenkning i en vandig opløsning med 10% kommercielt tilgængeligt blegemiddel i ikke mindre end en time
		Rengøring: Skyl i rent vand, og tør med varm luft før brug
		Bemærk: For objektglasholder (delnr. 5991052M), åbnes fjederklemmen. For fjederbelastet objektglasholder (delnr. 5991017M) udløses fjedertrykket ved at dreje trykløsløserkruen helt mod uret.
Genanvendeligt præparatkammer	Efter brug	Kontroller, at kammeret ikke er beskadiget
		Autoklaver ved 121°C (250°F) i 15 minutter. Plastikhætten må IKKE autoklaveres
		Bemærk: Gentagen autoklavering kan medføre misfarvning, hvilket dog ikke påvirker præparatkammerets funktion
		Alternativt kan det desinficeres ved nedsenkning i en vandig opløsning med 10% kommercielt tilgængeligt blegemiddel i ikke mindre end en time
		Rengøring: Brug en applikator med vatspids til at rense udgangsåbning og tragt. Skyl i rent vand, fjern overskydende vand ved at ryste det, og aftør
		Brug IKKE en metalbørste
Filterkort	Efter brug	Lægges i et desinficerende middel med fenoler, eller
		Autoklaver ved 121°C (250°F) i 15 minutter.
		Alternativt nedsænkes det i en vandig opløsning med 10% kommercielt tilgængeligt blegemiddel i ikke mindre end en time
		Kasseres i overensstemmelse med lokale procedurer afhængig af de anvendte materialer og præparater

