


# Shandon PapSpin™

## 妇科标本的样本采集规程

- 1 用相应的患者身份标明 PapSpin 收集小瓶。
- 2 从 PapSpin 收集液小瓶上取下盖子，把打开的小瓶放在桌上。
- 3 在不使用润滑剂的情况下插入阴道镜。
- 4 用 PAPERETTE™ 刷接触宫颈，并将中间刷毛深入颈管，直到较短的刷毛完全接触到阴道穹隆部。（见图）。

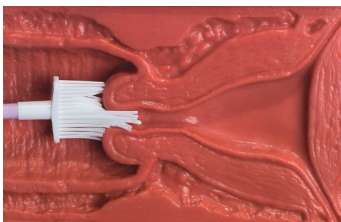

- 5 向着宫颈方向轻压，顺时针方向旋转小刷 5 次。取出 PAPERETTE™ 刷。



切勿放下 PAPERETTE™ 刷。

- 6 用镊子或带手套，取下白色刷状采样头，放进含细胞收集液的 PapSpin 采集瓶中。



立即进行本步骤，切勿拖延！

- 7 盖上小瓶，拧紧。摇动小瓶，准备运送。

### PapSpin 收集液的处理和存放

**处理：** 容器不用时须盖紧。在处理该溶液时，须戴上防护手套和使用防溅水龙头。为谨慎起见，建议穿上不透水的围裙。避免接触到皮肤和眼睛。若液体溢出，切勿继续穿戴受污染的衣物。

**存放：** 将本品存放在防火的存储柜中。须远离热源、火星和明火。

# Thermo

ELECTRON CORPORATION

Anatomical Pathology  
Clinical Diagnostics  
171 Industry Drive  
Pittsburgh  
PA 15275, USA

Tel: 1-800-547-7429  
+1 412 788 1133  
Fax: +1 412 788 1138  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

要再次订购 Shandon  
Papspin，请联络您当地的  
供应商，部件编号  
A78710006。

Anatomical Pathology  
Clinical Diagnostics  
93-96 Chadwick Road  
Astmoor, Runcorn  
Cheshire, WA7 1PR, UK

Tel: +44 (0) 1928 566611  
Fax: +44 (0) 1928 565845  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)