

# **Thermo**

ELECTRON CORPORATION

## **BRUKSANVISNING**

### **SHANDON CYTOCLIP™ GLASSHOLDER TPX PRØVEKAMRE FILTERKORT**

For bruk med Shandon Cytospin® cytosentrifuge

**A78310253**

3. utgave

### **Anatomical Pathology**

93 - 96 Chadwick Road, Astmoor, Runcorn, Cheshire, WA7 1PR, UK

Tel: +44 (0) 1928 566611;

Fax: +44 (0) 1928 565845;

[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

171 Industry Drive, Pittsburgh, Pennsylvania, PA 15275, U.S.A.

Tel: +1 412 788 1133;


Fax: +1 412 788 1138;

[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

## SHANDON CYTOSPIN® BRUKSANVISNING FORTILBEHØR

Shandon Cytoclip, TPX-kamre, filterkort

For bruk med Shandon Cytospin® cytosentrifuge

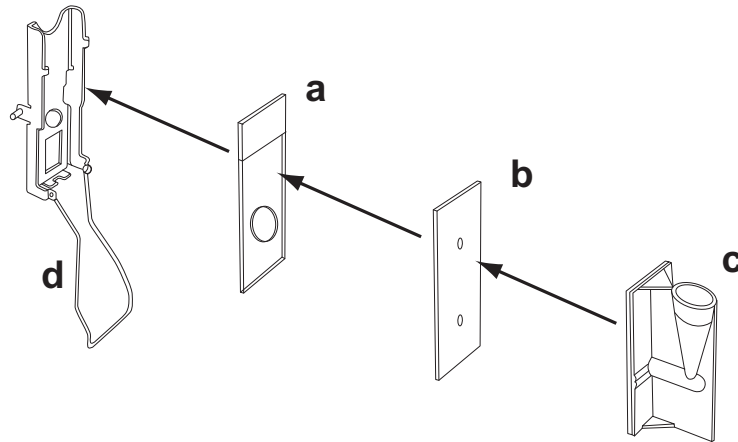

**Slik monterer du det gjenbrukbare prøvekammeret og filterkort på Shandon Cytoclip glassholder:**

- 1 Sett på objektglasset (a).
- 2 Sett på filterkortet (b).
- 3 Sett på det gjenbrukbare prøvekammeret (c).
- 4 Trekk opp fjæren (d), og trykk den inn i de to holderne, slik at kammeret holdes på plass.
- 5 Kontroller at prøvekammeret og filterkortet er riktig montert.

**Merk:** For å forsikre deg om at prøven ikke berører objektglasset før sentrifugeringen, må du alltid vente til prøvekammeret er på plass i det forseglede hodet før du legger inn prøven.

Hvis du vil ha anvisninger som gir en fullstendig beskrivelse av hvordan du bruker Shandon Cytospin, fyller i og balanserer det forseglede hodet, og legger i prøven, kan du se i brukerhåndboken for Shandon Cytospin.

**Når du skal ta objektglasset ut fra Cytoclip,** holder du med et godt tak i glassholderen og skyver fjæren mot objektglasset for å frigjøre den fra holderne. Skyv fjæren bort fra holderne, og frigjør prøvekammeret fra klipsen. Ta av objektglasset.

**Oppbevar Shandon Cytoclips, TPX-kamre og filterkort på et rent, tørt sted når de ikke er i bruk.**



**SØRG FOR Å PRAKTISERE GODE LABORATORIERUTINER VED HÅNDTERING AV POTENSIELT FARLIG MATERIALE**



**FILTERKORTENE ER BARE FOR ENGANGSBRUK - de må ikke brukes mer enn én gang.**

Thermo Electron Corporation makes every endeavour to ensure that the information contained in its support documentation is correct and clearly stated but does not accept responsibility for any errors or omissions. The development of Thermo products and services is continuous. Make sure that any published information that you use for reference is up to date and relates to the status of the product. If necessary, check with Thermo or your local Thermo representative.

All information contained in this manual is proprietary and confidential, and the exclusive property of Thermo Electron Corporation. This manual is protected by copyright and any reproduction is prohibited. This manual is for use only by the individuals to which it has been made available by Thermo Electron Corporation.

© 2002-2004 Thermo Electron Corporation. All rights reserved.

This manual may not, in whole or in part, be copied, photocopied, reproduced, translated, or converted to any electronic or machine readable form without prior written consent of Thermo

Tabellen nedenfor gir detaljerte instruksjoner for rengjøring og dekontaminering.

Tabell 1. Rengjøring og dekontaminering

Komponent	Hvor ofte	Instruksjoner
<b>Cytoclip Glassklips</b>	Daglig	<p><b>Sjekk:</b> Sjekk at klipsen ikke har skader</p> <p><b>Dekontaminer:</b> Autoklaving ved 121 °C i 15 minutter Alternativt kan den desinfiseres ved nedsenking i en 10 % løsning av kommersielt blekemiddel i vann i minst én time</p> <p><b>Rengjør:</b> Skyll i rent vann og tørk i varm luft før bruk</p> <p><b>Merk:</b> For Slide Clip (artikkelnummer 5991052M), skal fjæren åpnes. For fjærelastet Slide Clip (artikkelnummer 5991017M), skal belastningsskruen skrues mot klokken så langt den går, slik at fjærbelastningen frigjøres.</p>
<b>Gjenbrukbart prøvekommer</b>	Etter bruk	<p><b>Sjekk:</b> Sjekk at kammeret ikke har skader</p> <p><b>Dekontaminer:</b> Autoklaving ved 121 °C i 15 minutter. <b>DU MÅ IKKE bruke autoklaving på plastlokket</b> <b>Merk:</b> Eventuell misfarging som følge av gjentatt autoklaving vil ikke påvirke prøvekommeret negativt. Alternativt kan det desinfiseres ved nedsenking i en 10 % løsning av kommersielt blekemiddel i vann i minst én time</p> <p><b>Rengjør:</b> Bruk en bomullspinn og varmt såpevann til å rengjøre utgangen og trakten. Skyll i rent vann, rist av øverskuddsvann, og tørk det <b>DU MÅ IKKE bruke stålborste</b></p>
<b>Filterkort</b>	Etter bruk	<p><b>Dekontaminer:</b> Kasser i et fenolholdig desinfiseringsmiddel, eller Autoklaving ved 121 °C i 15 minutter. Alternativt kan den senkes ned i en 10 % løsning av kommersielt blekemiddel og vann i minst en time</p> <p>Kasseres på godkjent måte i henhold til lokale prosedyrer avhengig prøvene og materialene som er brukt</p>

